


乾式薄膜快檢培養基

Simple and Easy Dry Media Count and Detection

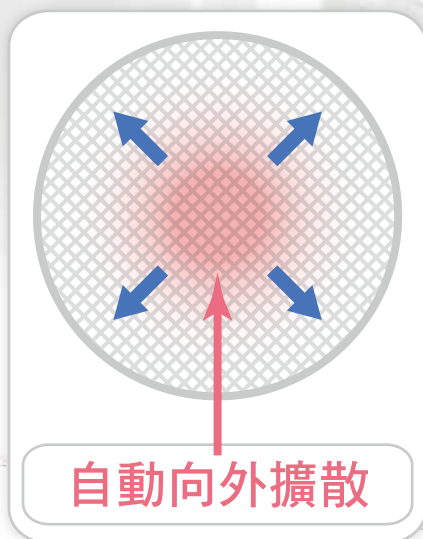


獨特立體纖維材質，內含乾燥培養基和膠化劑，不需繁瑣步驟，就能快速完成接種。

產品優點：

- 輕巧方便、不占空間
- 血型乾式培養基，樣品不滲漏
- 乾燥培養基，效期長
- 儲存方便、室溫保存
- 操作簡單、不須壓板
- 顯色明顯，容易判讀
- 國際AOAC認證
- 多種產品、多種菌種可檢測

CompactDry™

6 步驟教學

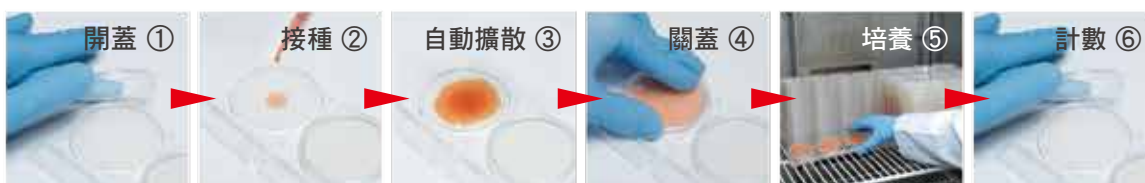

眾多
領域



可用於	對應名稱	溫度	效期	可用於	對應名稱	溫度	效期
總生菌數	CompactDry TC	Up to 30°C	18 個月	沙門氏菌	CompactDry SL	Up to 30°C	18 個月
大腸桿菌和大腸桿菌群	CompactDry EC			綠膿桿菌	CompactDry PA		
金黃色葡萄球菌	CompactDry X-SA			大腸桿菌	CompactDry CF		
黴菌和酵母菌	CompactDry YM/YMR			腸炎弧菌	CompactDry -VP		
仙人掌桿菌	CompactDry X-BC			樣品採集	Easy Wiping Kit		
						Up to 30°C	2 年



乾式薄膜快檢培養基

Simple and Easy Dry Media Count and Detection

總生菌數

CompactDry "Nissui" TC

AOAC/MicroVal/NordVal



培養溫度

35±2度

培養時間

48±3小時

說明


所有菌落

● / ○

大腸桿菌和大腸桿菌群

CompactDry "Nissui" EC

AOAC/MicroVal/NordVal

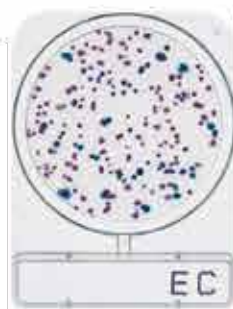

培養溫度

35±2度

培養時間

24±2小時

說明

大腸桿菌：
藍色/藍紫色菌落
大腸桿菌群：
紅色/藍色菌落總數

● / ●

金色葡萄球菌

CompactDry "Nissui" X-SA

AOAC/MicroVal/NordVal



培養溫度

35±2度

培養時間

24±2小時

說明

淺藍色/藍色菌落

● / ●

黴菌和酵母菌

CompactDry "Nissui" YM

AOAC/MicroVal/NordVal



培養溫度

25±2度

培養時間

3-7天

說明

酵母菌：
藍色或白色到淡黃色菌落
黴菌：
黴菌色綿狀菌落

● / ○

黴菌和酵母菌

CompactDry "Nissui" YMR

AOAC/MicroVal/NordVal



培養溫度

25±2度

培養時間

48-72小時

說明

酵母菌：
藍色或白色到淡黃色菌落
黴菌：
黴菌色綿狀菌落

● / ○

仙人掌桿菌

CompactDry "Nissui" X-BC

MicroVal/NordVal



培養溫度

35±2度

培養時間

24±2小時

說明


綠色/藍色菌落

● / ●

大腸桿菌群

CompactDry "Nissui" CF

AOAC/MicroVal/NordVal

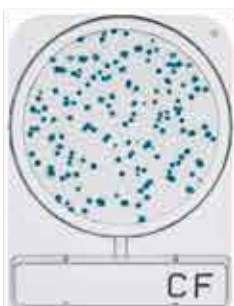

培養溫度

35±2度

培養時間

24±2小時

說明

藍色/藍綠色菌落

● / ●

腸炎弧菌

CompactDry "Nissui" VP

MicroVal/NordVal



培養溫度

35±2度

培養時間

18-20小時

說明

藍色/藍綠色菌落

● / ●

綠膿桿菌

CompactDry "Nissui" PA

MicroVal/NordVal



培養溫度

35±2度

培養時間

24-48小時

說明

紅色菌落
外層有綠色/黃色暈光

● / ●